

TR 1700

In hoogte verstelbaar badsysteem



Specificaties

Lengte	1685 mm
Breedte	695 mm
Hoogte	660-960 mm
Maximale werklust	150 kg
Bediening	Handbediening voor hoogte-instellingen
Stroomvoorziening	230 V, 50 Hz



CE Geregistreerd door Medical Products Agency als een MD klasse 1 product, MDD 93/42EEC.

TR 1700 in hoogte verstelbaar badsysteem - Functioneel bad voor beperkt beschikbare ruimte

TR 1700 badsysteem is specifiek ontworpen om een kleine ruimte optimaal te benutten, zonder functionaliteit en doelmatigheid op te offeren.

TR 1700 badsysteem kan elektrisch in hoogte versteld worden, om zo de ideale instaphoogte voor de gebruiker en de ideale werkhogte voor de zorgverlener te verkrijgen. Dit vermindert zwaar tillen en bukken, vermoeidheid en het risico van rugletsel. De ruimte onder het bad maakt het gebruik van veel verschillende typen tilliften mogelijk en vergemakkelijkt het reinigen van de vloer eronder.

TR 1700 in combinatie met TR 9651 badlift met badstoel zorgt voor een veilige manier van zorgverlenen voor zowel gebruiker als zorgverlener. Tijdens het baden en verzorgen kan de gebruiker op de badstoel blijven zitten.



TR 1700 kan worden geleverd met een thermostaat die de temperatuur van zowel de badinhoud als van de douche regelt. TR 1700 is ook zonder thermostaatkraan verkrijgbaar.



De elektrische hoogteverstelling van TR 1700 wordt via de handbediening aangestuurd. Doordat de handbediening is voorzien van een kruisnoer, kan dit vanaf elke zijde van het bad.

TR EQUIPMENT

TR EQUIPMENT AB

PO Box 116, S-573 22, TRANÅS, SWEDEN

Phone: +46 140-38 50 60

Fax: +46 140-38 50 61

TR GROUP INC.

2990 NORTH PERRYVILLE RD, SUITE 2300, ROCKFORD, IL 61107, USA

Phone: +1-800-752-6900

Fax: +1 815 633-0549

TR EQUIPMENT UK LTD.

INNOVATION CENTRE, GALLOWS HILL, WARWICK CV34 6UW ENGLAND

Phone: +44 844 335 8386

Fax: +44 844 335 8383

TRANSPORHEMED GMBH

GRÜNBAUMSTR. 89 42659 SOLINGEN. GERMANY

Phone: +49 (0) 212-645850-0

Fax: +49 (0)212-645850-50

Hygiene Equipment Designed for People

www.trequipment.com



TR 1700

In hoogte verstelbaar badsysteem



Eigenschappen

TR 1700 badsysteem is gemakkelijk in hoogte te verstellen. Met de handbediening kan TR 1700 worden bediend vanaf elke zijde van het bad.

Door aan de draaiknop bij het overstroomventiel te draaien kan de afvoerstop worden geopend en gesloten.


De in de fabriek gemonteerde thermostaat regelt zowel de temperatuur van het badwater als van de douche.

TR 1700 badsysteem is voorzien van instelbare pootjes die bij oneffen vloeren comfort en veiligheid vergroten.


De douchehandgreep heeft een zacht rubberen sproeier die gemakkelijk schoon te maken is en een zachte waterverdeling geeft.

TR 1700 badsysteem is gemaakt van acryl glasvezel en het frame en de randen zijn van gepoedercoat staal. De acryl badkuip waarborgt het langer vasthouden van de warmte van het badwater.

TR 1700 badsysteem wordt geleverd met een flexibele afvoerslang. Hierdoor kan TR 1700 zowel op een afvoer in de muur als een afvoer in de vloer worden aangesloten.

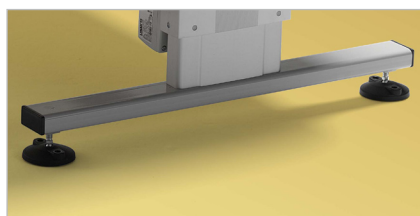


Instelbare pootjes vergroten comfort en veiligheid in het geval van een oneffen vloeroppervlak.

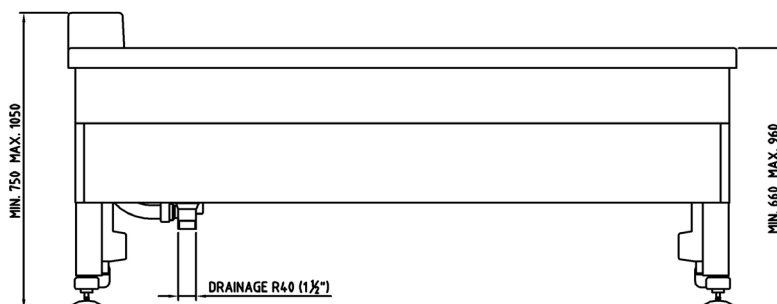

Opties

TR 1700 badsysteem wordt standaard geleverd met thermostaat en douche. Het is ook mogelijk om tegen een minder prijs het bad zonder thermostaat en douche te bestellen.

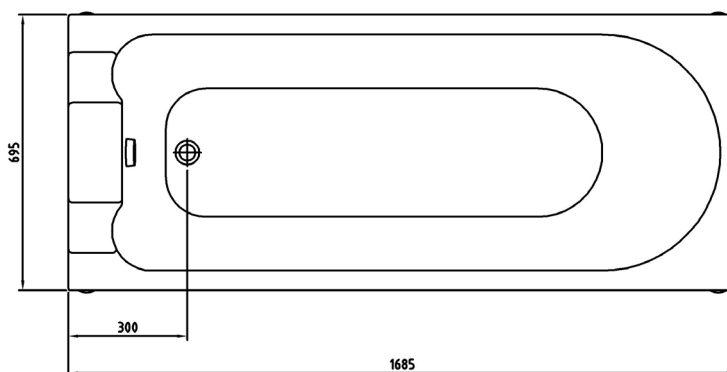

TR behoudt zich het recht voor om zonder afzonderlijke mededeling veranderingen en/of verbeteringen aan het ontwerp aan te brengen.



Importeur Nederland:

TR-Care B.V.
Postbus 2
4050 EA Ochten, Nederland

Telefoon: +31 (0)344 643 788
Fax: +31 (0)344 643 521
E-mail: info@tr-care.nl
Website: www.tr-care.nl

TR EQUIPMENT

TR EQUIPMENT AB PO Box 116, S-573 22, TRANÅS, SWEDEN
TR GROUP INC. 2990 NORTH PERRYVILLE RD, SUITE 2300, ROCKFORD, IL 61107, USA
TR EQUIPMENT UK LTD. INNOVATION CENTRE, GALLOWES HILL, WARWICK CV34 6UW ENGLAND
TRANSPORHAMED GMBH GRÜNBAUMSTR. 89 42659 SOLINGEN. GERMANY

Phone: +46 140-38 50 60 Fax: +46 140-38 50 61
Phone: +1-800-752-6900 Fax: +1 815 633-0549
Phone: +44 844 335 8386 Fax: +44 844 335 8383
Phone: +49 (0) 212-645850-0 Fax: +49 (0)212-645850-50

Hygiene Equipment Designed for People

www.trequipment.com

