



TR Equipment

Equipo higiénico diseñado para personas

*Hygiene Equipment
Designed for People*

Catálogo de productos



CE

Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDD 93/42EEC.

TR reserves the right to make design changes and/or improvements without notice.



TR EQUIPMENT



TR Equipment

Equipo higiénico diseñado para personas

Hygiene Equipment
Designed for People

Camillas de Ducha



TR Equipment ofrece el programa de camillas de ducha más amplio del mercado con varias opciones de tamaño y capacidad de peso, ya sean hidráulicas u operadas por batería.

TR 2000

Hidráulica

Estándar – Pediátrica – Larga

Longitud: 1600/1900/2100 mm – 63"/75"/83"

Ancho: 705 mm – 27 3/4"

Capacidad de peso: 150 kg – 330 lb



La Camilla de Ducha TR es única gracias a su columna lateral, la cual permite que la camilla se sobreponga sobre la cama para que el paciente pueda ser transferido de manera segura y fácil. La camilla ayuda y funciona desde el lado de la cama, lo cual le permite al asistente acceso libre de manos a los controles de pedales de la camilla, mediante los cuales puede ajustar la altura de la camilla, colocarle los frenos a las ruedas, y dirigir la camilla en forma recta.

El diseño único de base desplazada, en combinación con las rejillas laterales con bisagras, le permite al asistente sobreponer la camilla sobre la cama, para así poder transferir al paciente de manera segura. Luego de que la camilla esté asegurada en su posición y la rejilla lateral esté plegada hacia abajo para no estorbar, el asistente puede transferir al paciente fácilmente al colchón de la camilla de manera segura. Entonces las rejillas laterales de la camilla se aseguran plegadas hacia arriba nuevamente para que el paciente pueda ser movido en la camilla.

La camilla puede ser inclinada en ambas direcciones para la posición "Trendelenburg" y tiene drenaje a ambos lados, lo cual permite que la persona pueda ser colocada en cualquiera de las dos direcciones. No hay un extremo específico para la cabeza ni para los pies.

La camilla TR 2000/3000 puede ser ordenada en tres longitudes diferentes, y el colchón y la almohada están disponibles en tres colores diferentes: Gris (Estándar), Azul (Opcional) o Amarillo (Opcional).



TR 3000

Operada por batería

Estándar – Pediátrica – Larga

Longitud: 1600/1900/2100 mm – 63"/75"/83"

Ancho: 705 mm – 27 3/4"

Capacidad de peso: 150 kg – 330 lb

Head office

TR Equipment AB, Sweden
Phone: +46 140 38 50 60
info@trequipment.se
www.trequipment.com

TR Group Inc

130 North Madison Street
Rockford, IL61107, USA
Phone: +1 (800) 752 6900
Email: information@trequipment.com
www.trequipment.com



TR EQUIPMENT



TR Equipment

Equipo higiénico diseñado para personas

Hygiene Equipment
Designed for People

Camillas de Ducha Bariátricas



TR 4000 Atlas

Operada por batería

Bariátrica

Longitud: 2210 mm – 87”

Ancho: 915 mm – 36”

Capacidad de peso: 400 kg – 1000 lb



Las camillas de ducha Atlas y Atlas Junior son camillas multi-uso que están diseñadas con todos los requisitos de energía y espacio necesarios para manejar a los pacientes bariátricos de manera segura. Su diseño flexible permite que estas camillas sean usadas en la ducha, para transporte, y para cambiar o tratar a los pacientes bariátricos.

La persona puede ser transferida de la cama a la ducha y de vuelta a la cama de manera segura. Actuadores dobles operados por baterías recargables suben y bajan la camilla fácil y calladamente, con un control de mano fácil de usar. El control de mano opera el sistema de inclinación en ambas direcciones para un drenaje efectivo, y además puede inclinar la camilla a la posición “Trendelenburg.” Un sonido es emitido cuando la camilla vuelve a su posición horizontal.

Las rejillas laterales tienen bisagras que les permiten ser plegadas completamente hacia abajo para la transferencia segura y eficiente del paciente. Para transportación segura en la camilla, las rejillas laterales suben fácilmente para ser aseguradas plegadas hacia arriba nuevamente. Las camillas Atlas y Atlas Junior tienen controles de pedales convenientes que permiten colocar un seguro central además de dirigir la camilla en forma recta. Ambas camillas pueden ser colocadas de manera completamente horizontal para la transferencia del paciente y pueden ser inclinadas para transferencia o para ser usadas en la ducha con drenaje aumentado. Las rejillas a los extremos de la cabecera y de los pies en la camilla Atlas 4000 pueden ser colocadas de forma horizontal para acomodar a pacientes más altos.

TR 4200 Atlas Junior

Operada por batería

Bariátrica

Longitud: 2150 mm – 85”

Ancho: 740 mm – 29”

Capacidad de peso: 240 kg – 600 lb

TR 2810 - Panel de Ducha

El Panel de Ducha TR 2810 tiene una válvula termoscópica mezcladora para la ducha y válvulas que abren y cierran para el cabezal de la ducha y para los mangos de limpieza. El sistema de limpieza corre con agua fría para minimizar inhalación al limpiar el equipo. Contiene una botella visible parcialmente integrada con tapa para detergente de limpieza.

Las Camillas de Ducha TR facilitan la transferencia y limpieza de pacientes para los asistentes. Cuando las camillas se integran con el Panel de Ducha TR 2810, TR provee un sistema de ducha completo.



Head office

TR Equipment AB, Sweden
Phone: +46 140 38 50 60
info@trequipment.se
www.trequipment.com

TR Group Inc

130 North Madison Street
Rockford, IL61107, USA
Phone: +1 (800) 752 6900
Email: information@trequipment.com
www.trequipment.com



TR EQUIPMENT



TR Equipment

Equipo higiénico diseñado para personas

Hygiene Equipment
Designed for People


Sistemas de Baño



TR 900 - Baño Ajustable con Funciones Completas

El TR 900 es una bañera cuya altura puede ser ajustada para ser utilizada en instituciones que no permiten que los asistentes eleven a los pacientes. Los asistentes pueden ser más productivos mientras bañan a los pacientes en un ambiente de manejo seguro. El TR 900 mejorará la calidad del cuidado.

El diseño funcional de tener a la bañera y el panel integrados en el TR 900 hace que su operación sea fácil y conveniente. El diseño de la bañera en forma de ojo de cerradura provee más espacio a lo ancho en la cabecera, lo cual resulta en más espacio para los brazos y hombros. Las líneas suaves del TR 900 significan mantenimiento y limpieza fáciles. Disponible con ajuste de altura, hidromasaje, sistema de limpieza, y relleno automático, el TR 900 es un baño yacente con funciones completas.

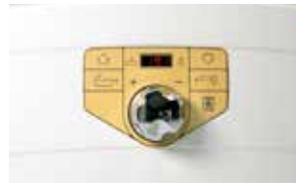

Los modelos TR 900 Autofill con relleno automático son aún más simples y eficientes de usar. No hay por qué esperar u observar cuando se rellena la bañera.



TR 1700 - Baño Ajustable para Espacios Limitados

El TR 1700 fue diseñado específicamente para optimizar su espacio limitado sin tener que sacrificar función y eficiencia. Es ideal para hospitales, asilos de ancianos y hogares privados que tienen espacio limitado pero requieren una bañera con funciones completas.

TR Comfortline II - Baño Ajustable de Bienestar

Funcional – Práctico – Fácil de usar

El Comfortline II provee una experiencia de baño superior. El diseño simple y agradable provee un acercamiento visual más tradicional al baño. Las opciones disponibles para proveerle al usuario una experiencia relajante de baño son hidromasaje ajustable, sistema de luces de color LED, y sistema de ondas sonoras musicales.



Head office

TR Equipment AB, Sweden
Phone: +46 140 38 50 60
info@trequipment.se
www.trequipment.com

TR Group Inc

130 North Madison Street
Rockford, IL61107, USA
Phone: +1 (800) 752 6900
Email: information@trequipment.com
www.trequipment.com



TR EQUIPMENT



TR Equipment

Equipo higiénico diseñado para personas

Hygiene Equipment
Designed for People

Sistema de Transporte



TR 9650 - Alzador combinado con silla y camilla intercambiables

El Sistema de Transporte TR 9650 está diseñado para flexibilidad máxima. Este sistema provee una ganancia mayor en inversión de equipo, pues acepta la silla o la camilla, de manera que una sola unidad puede transferir a personas sentadas o yacentes. Se puede utilizar para levantar a pacientes del suelo o de la cama. El alzador provee la opción de incluir una pesa.



Silla grúa - 0542000



Camilla grúa - 0542010



Grúa combinada - 0542020

El sistema único del alzador combinado es impulsado por correas, lo cual eleva y baja a los pacientes a cualquier posición deseada por el asistente de manera suave y callada. Las baterías recargables de alta capacidad corren el alzador combinado, y los controles de pedales están colocados convenientemente en la base para operación libre de manos. Acceso a todos los componentes simplifica la limpieza de la unidad.

Ya sea la transferencia de un paciente de su cama, o la elevación de un paciente yacente en el suelo, la versatilidad del alzador combinado puede acomodar cualquier situación. Cambiar entre la silla y la camilla es un procedimiento simple que no requiere herramientas.

Reconociendo que cada persona es diferente, ¡diseñamos para flexibilidad máxima!

Head office
TR Equipment AB, Sweden
Phone: +46 140 38 50 60
info@trequipment.se
www.trequipment.com

TR Group Inc
130 North Madison Street
Rockford, IL61107, USA
Phone: +1 (800) 752 6900
Email: information@trequipment.com
www.trequipment.com



TR EQUIPMENT



TR Equipment

Equipo higiénico diseñado para personas

*Hygiene Equipment
Designed for People*

TR Classis - Mesa de Inclinación



La Mesa de Inclinación TR Classic está diseñada para que sea fácil y seguro llevar a cabo pruebas, rehabilitación, y posicionamiento y transferencia de pacientes. La TR Classic es una selección lógica para pacientes con parálisis, postrados en cama, o en sillas de ruedas quienes se beneficiarían de estancia de pie pasiva para mejorar la circulación o para reducir edema en extremidades bajas.

La TR Classic puede ser utilizada en cualquier ambiente para ayudar al asistente a transferir al paciente y a proveerle tratamiento.

La TR Classic viene con tres cabestrillos y una canasta de alambre.



Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDD 93/42EEC.

Todos los productos son fabricados en Suecia



TR Group Inc.

2990 North Perryville Road
Suite 2300
Rockford
IL 61107
USA

Phone: +1 (800) 752 6900
Toll free: 800 752 6900 (US only)
Fax: +1 (815) 633 0549
www.trequipment.com
information@trequipment.com

Head office
TR Equipment AB, Sweden
Phone: +46 140 38 50 60
info@trequipment.se
www.trequipment.com

TR Group Inc
130 North Madison Street
Rockford, IL61107, USA
Phone: +1 (800) 752 6900
Email: information@trequipment.com
www.trequipment.com



TR EQUIPMENT