



TR Comfortline

Baignoire

Équipements d'hygiène
conçus pour les personnes

TR Comfortline, baignoire à hauteur ajustable

La TR Comfortline est une baignoire autonome et à hauteur ajustable, conçue pour une expérience de bain agréable et relaxante.

CE



Enregistré à Medical Products
Agency, Suède, comme produit
MD Class 1, MDD 93/42EEC.

TR se réserve le droit de changer le
design et/ou faire des
améliorations sans préavis.



Utilisé conjointement avec le chariot de transfert TR 9650, la Comfortline est facilement accessible des deux côtés de la baignoire. Le personnel bénéficiera du design ergonomique et du cycle de bain efficace de la Comfortline. L'installation facile de la Comfortline lui permet d'être positionnée dans presque toutes les zones ou salles de bain.

Les commandes ont été conçues avec simplicité et le design lisse la rend facile à nettoyer et entretenir.



TR EQUIPMENT



TR Comfortline

Baignoire

Équipements d'hygiène
conçus pour les personnes

Fonctionnalités

- Design innovant et attractif
- Facile de manipulation et apprentissage
- Accès facile à la baignoire de trois côtés
- Design compact pour un placement facile
- Forme de baignoire ergonomique
- Facile à nettoyer et entretenir
- Convient aux transferts mobiles (TR 9650 avec brancard/chaise est recommandé)
- Détachée, pas de fixation au mur ou sol

Équipement standard

- Douchette manuelle avec long tuyau
- Débordeur et tuyau d'évacuation inclus
- Baignoire de haute qualité avec protections latérales en fibre de verre renforcée
- Blanc couleur par défaut
- Deux poignées en chrome
- Support de pieds, ajustable sur trois positions et détachable
- Tuyaux renforcés pour les installations
- Deux larges pieds ajustables en acier inoxydable



Exemples d'utilisation


Combinée avec le chariot de transfert TR 9650, le système permet un déplacement et une manipulation sûre pour le patient et le personnel. Durant le cycle de bain, le client ne quitte jamais le confort et la sécurité de la chaise ou du brancard.



Caractéristiques techniques

Longueur	2080 mm / 82"
Largeur	780 mm / 31"
Charge maximale	150 kg (330 lbs)
Vitesse de levage, vide	8 mm/s / 0.3 inch/s
Hauteur de travail	650 - 1000 mm / 26" - 40"
Alimentation	230 V, 50 Hz, 10 A / 110 V, 60 Hz
Poids total, à vide	environ 100 kg / 220 lbs

Dimensions (mm)

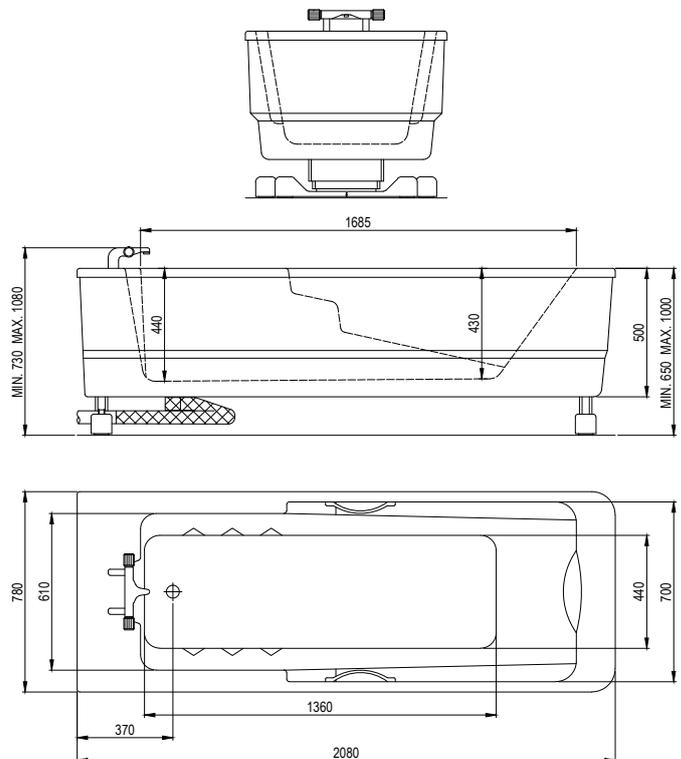

Siège social

TR Equipment AB, Sweden
Phone: +46 140 38 50 60
info@trequipment.se
www.trequipment.com

Filiales

TR Group Inc, US, Phone: +1 (800) 752 6900
TR Equipment Ltd, UK, Phone: +44 (0) 844 335 8386
TRanspoRehaMed GmbH, Allemagne, Phone: +49 (0) 212 645850-0



TR EQUIPMENT